

Konfort Plus

Agradecemos su preferencia de los productos Konfort Plus. Deseamos conocer sus comentarios, preguntas y opinión sobre la calidad de servicio que ha recibido de su distribuidor autorizado.

Para contestar sus inquietudes

Su distribuidor autorizado puede brindarle una asesoría y responder todas sus inquietudes acerca de la seguridad, uso y mantenimiento. Para referencia futura, complete la siguiente información:

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

No. Serie:


Fecha de Compra:

Este manual provee instrucciones importantes respecto a la seguridad y mantenimiento del producto. Asegúrese de leerlo cuidadosamente antes de usarlo, y consúltelo cuantas veces sea necesario para garantizar el uso apropiado y seguro.

Para servicio y reparaciones, recuerde que su distribuidor autorizado de KP le puede ofrecer la ayuda que necesite.

Conserve este manual en un lugar seguro para una consulta futura.

Conozca más
de este producto
escanenaando este
código QR

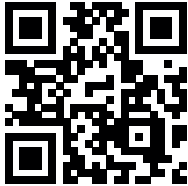

Precauciones adicionales

- Inpeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO USE EL PRODUCTO si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor para recibir instrucciones adicionales.
- Asegúrese que los pines de seguridad de ajuste en altura salgan completamente por los orificios respectivos para cada extensión de la base. Esto asegurará que las extensiones de las bases estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una posición uniforme.
- Asegúrese que todos los tornillos estén ajustados.
- Verifique que las ruedas no estén rotas, desgastadas o ausentes. Si encuentra daños o imperfecciones reemplácelas inmediatamente.
- Todas las cuatro (4) ruedas de la base DEBEN tocar el piso simultáneamente en todo momento.
- NO se pare sobre el cómodo.

Especificaciones Técnicas

Material estructura:	Aluminio pintado
Peso neto:	6,8 Kg
Capacidad de peso:	120 Kg
Medidas asiento:	43 cm x 43 cm
Altura del asiento al piso:	53 cm [min] - 58 cm [máx]
Calibre del tubo:	1,86 cm
Tipo de apoyo:	Ruedas de 3,8" en plástico


Garantía

Los cómodos sanitarios Konfort Plus cuentan con dos (2) años de garantía en la estructura central por defectos de fabricación.

Esta garantía no cubre fallas del producto debidas al mal uso, o negligencia por parte del propietario, exceso en la capacidad de peso, o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como: El balde y su respectiva tapa, asiento, respaldo, apoyabrazos y ruedas; que están sujetas a desgaste normal y necesitan un reemplazo periódico.




Fabricante: Double Care Medical Technology Co., Ltd.
Dirección del Fabricante: Yongshi Avenue, Shiwuan Town, Baluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China
Importado por: Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.
Dirección del Importador: Calle 32A # 26 -58, Palmira, Colombia.
Teléfono: (2) 265 5088

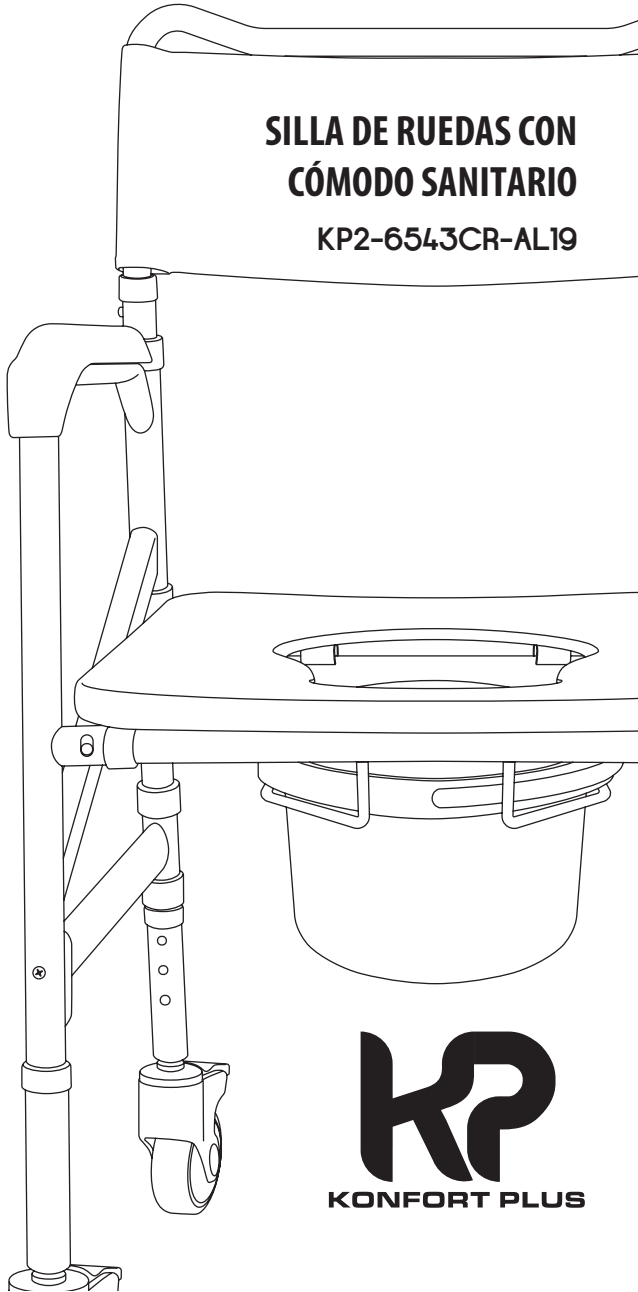


Instrucciones de Instalación para el Modelo: KP2-6543CR-AL19

Antes de iniciar la instalación verifique que todas las partes estén completas:

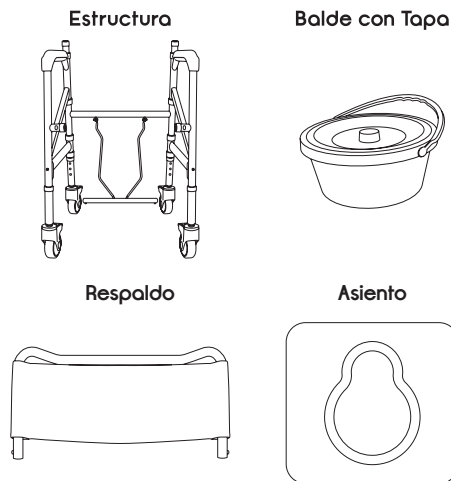


Armar la Estructura

Despliegue los laterales de la estructura (un lado a la vez); en posición perpendicular al respaldo; de tal manera que los recibidores de ensamble queden en la parte interna.

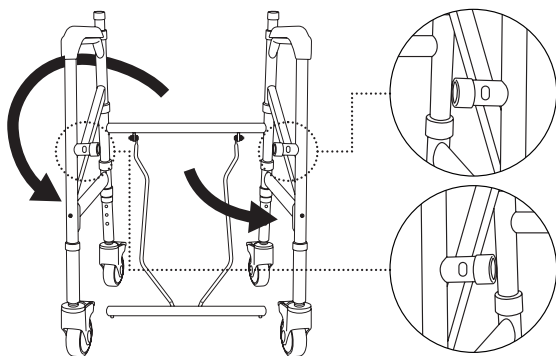


Levante la barra de la parrilla, y ensamble cada extremo de los recibidores, validando que el pin de ajuste quede completamente expuesto en cada lado.

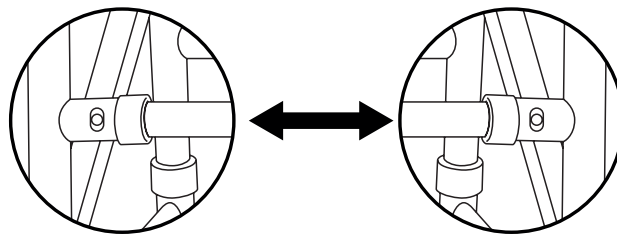


Instalar el respaldo

Se debe ubicar en la parte superior de la estructura, valide que los pines de ajuste queden completamente expuestos

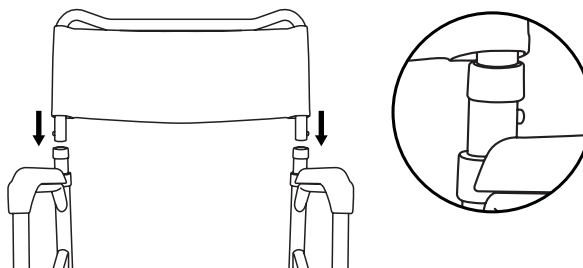


Instalar el balde con tapa

Inserte el balde en la parte superior de la parrilla del cómodo sanitario.

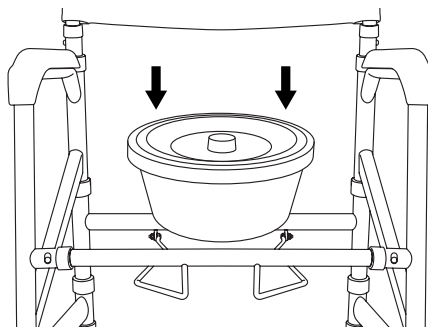

Instalar el asiento


Coloque los acoples del asiento en la barra trasera de la parrilla, y ejerza presión para ajustar el asiento.

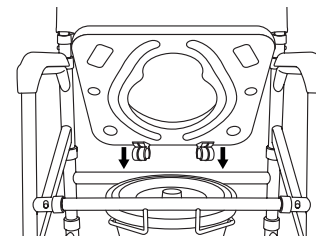

Graduación en Altura

Para ajustar la altura, presione el pin de seguridad de la base del cómodo y llévelo hasta la opción de altura deseada. Repita este procedimiento en las otras tres bases del cómodo.

Asegúrese de colocar la misma altura en las 4 bases del cómodo. Presione las bases hacia abajo para asegurarse que quedaron bloqueadas en su lugar.

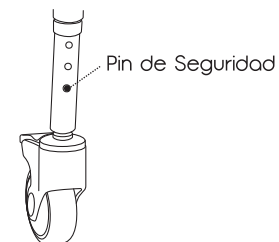

Limpieza

Para conservar en buen estado el cómodo sanitario Konfort Plus, es necesario que después de cada uso limpie el balde, la tapa y el asiento. Haga limpiezas periódicas al balde, tapa, asiento y apoyabrazos dependiendo de su uso con jabón suave y enjuague con agua tibia. No utilice abrasivos.

Mantenga lubricados los pines de ajuste para que éstos funcionen correctamente.