


5



Ajuste el modo de estimulación, el tiempo de funcionamiento, la frecuencia y ancho de pulso de acuerdo a lo indicado por un profesional de la salud.

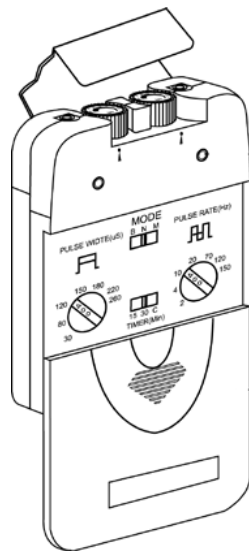


GMD[®]

WWW.GMD.COM.CO




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

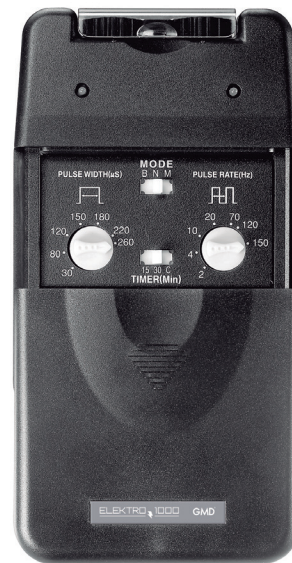


ELEKTRO
1000

GMD[®]


1 ➤ Limpie y seque la piel en el área a estimular.

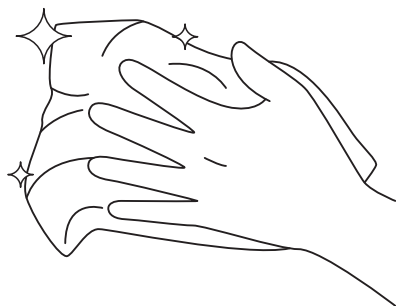

2 ➤ Inserte el cable conductor en los electrodos.

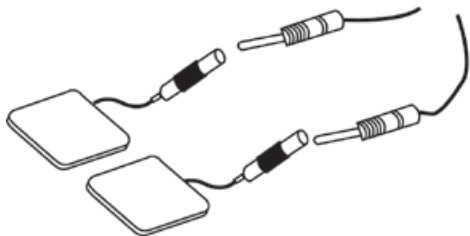

3 ➤ Retire el revestimiento protector de los electrodos y aplíquelos firmemente en el lugar de tratamiento.

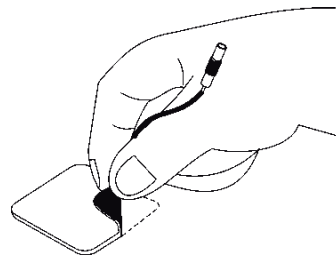

4 ➤ Inserte los cables conductores al TENS.

