

7. Disposición final

	El material de embalaje es reciclable. Deséchelo de forma que proteja el medio ambiente o llévelo a un centro de reciclaje.
	Deseche el dispositivo de forma que proteja el medio ambiente o llévelo a centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Puedes obtener más información de sus autoridades locales.
	Para proteger el medio ambiente, la batería no se puede desechar en los contenedores de desperdicios domésticos normales. Sepárelas del dispositivo antes de desecharlas o llévelas a un lugar adecuado de recolección. Para más información, por favor consulte a sus autoridades locales acerca de las normas que rigen la eliminación de baterías.

8. Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación o funcionamiento. La garantía no cubre:

- Uso inadecuado o en condiciones distintas a las normales.
 - Reparaciones realizadas por personal no autorizado.
 - Daños ocasionados por golpes, caídas, humedad o instalación incorrecta de pilas.
- Para hacer válida la garantía, o cualquier duda o asistencia requerida, comuníquese con nuestro servicio al cliente

Líneas de servicio al cliente



- +57 (602) 285 5088 ext. 104
- +57 310 493 6998
- servicioalcliente@impormedical.com.co

FABRICADO POR:
Guangdong Welland Technology Co., Ltd
No.85 MinKe East Road, MinYing Science & Technology
Park, ShiQi District,Zhongshan, Guangdong, China.

IMPORTADO POR:
Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.
Calle 5 Oeste # 4A - 12, Cali, Valle del Cauca, Colombia.

MANUAL DE USUARIO
BALANZA DIGITAL
DE PESO CORPORAL

Referencia: CDK-BD-2317W



Gracias por adquirir la balanza digital CDK-BD-2317W.


Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecer una medición precisa y confiable del peso corporal en el hogar.

Lea atentamente este manual antes de utilizar la balanza y conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. Contenido

1. Balanza digital CDK-BD-2317W
2. Manual de usuario

2. Colocación de las pilas

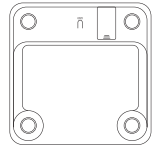

1. Abra la tapa del compartimento de pilas en la parte inferior de la balanza.
2. Inserte 2 pilas AAA de 1,5 V respetando la polaridad indicada (+/-).
3. Cierre la tapa correctamente antes de usar la balanza.

⚠ Retire las pilas si la balanza no será utilizada por un periodo prolongado para evitar corrosión.


3. Uso del dispositivo



1. Coloque la balanza en una superficie plana, firme y dura (no usar en alfombras ni pisos blandos). En caso de pisos con baldosa, procure que la balanza quede ubicada en una misma baldosa.



2. Presione con el pie la superficie de la balanza hasta que se encienda automáticamente y retire el pie de la balanza.
3. Espere a que la pantalla indique O.O y suba a la balanza procurando que los pies queden ubicados completamente dentro de la superficie de la balanza.
4. Sin moverse, espere unos segundos hasta que el peso se estabilice. El valor parpadeará tres veces y quedará fijo en pantalla.

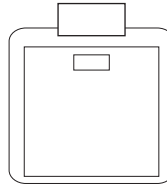

5. Una vez se baje, la balanza se apagará automáticamente tras aproximadamente 15 segundos.

4. Indicaciones en la pantalla



'Lo' -> batería baja, se requiere cambio de las baterías.



'Err' -> sobrecarga, se supera el peso máximo



'C' -> Error de ajuste, reinicie el pesaje. Asegúrese de permitir que la balanza retorne a O.O antes de realizar el pesaje.

5. Especificaciones técnicas

Referencia	CDK-BD-2317W
Material	Vidrio templado, estructura en HIPS
Dimensiones	260 x 260 x 24 mm
Dimensión del vidrio templado	260 x 260 x 5 mm
Dimensión de la pantalla	63.4 x 26 mm
Peso neto	0.99 kg
Alimentación eléctrica	3 Vdc (2 x AAA)
Unidad de medición	kg
Rango de medición efectivo	5 – 180 kg
Resolución de medida	0.05 kg (5 – 100 kg) 0.1 kg (100 – 180 kg)
Exactitud de medida	± 0.3 kg (5 – 60 kg) ± 0.4 kg (60 – 120 kg) ± 0.5 kg (120 – 180 kg)
Apagado automática	Aprox. 15 s
Condiciones de operación	5 – 35 °C 40 – 85 % HR
Condiciones de almacenamiento	-20 – 60 °C 40 – 85 % HR

6. Indicaciones en la pantalla

- Limpie la superficie con un paño suave y seco; si es necesario use un paño ligeramente humedecido.
- No utilice productos químicos corrosivos ni sumerja la balanza en agua.
- Evite golpes, saltos o pisar bruscamente la plataforma.
- No coloque objetos filosos ni calientes sobre el vidrio.
- Mantenga la balanza en lugares secos, sin exposición directa al sol o temperaturas extremas.
- No intente abrir ni reparar el equipo por su cuenta.
- Verifique constantemente el estado de la carcasa y el vidrio, si detecta alguna fractura, evite el uso del dispositivo, la misma puede generar riesgos de cortaduras.