

# ESPIRÓMETRO

PARA INHALACIÓN

# GMD®



Líneas de servicio al cliente

+57 (602) 285 5088 ext 104

+57 310 493 6998


[serviciocliente@impomedical.com.co](mailto:serviciocliente@impomedical.com.co)



# ESPIRÓMETRO

PARA INHALACIÓN

GMD-SP002

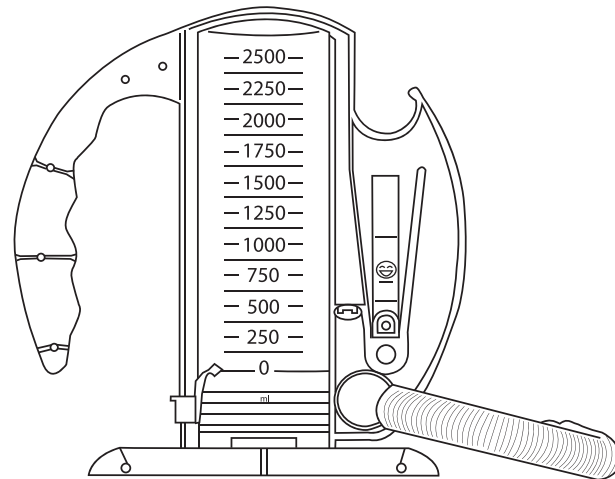


Guía de inicio rápido

GMD®

Al momento de usar el espirómetro respire por la boca para que el dispositivo funcione adecuadamente y siga las instrucciones:

1. Conecte el tubo de entrada y la boquilla.
2. Siéntese en posición recta y sostenga el espirómetro de incentivo a la altura de los ojos.
3. Relájese y elimine con calma el aire de los pulmones.
4. Poner la boquilla en la boca.
5. Inhala lentamente hasta que la boya se mantenga dentro del rango de flujo adecuado, e intente que el pistón se eleve todo lo que pueda.
6. Tómese un descanso, ajuste la respiración y continúe con el siguiente entrenamiento.

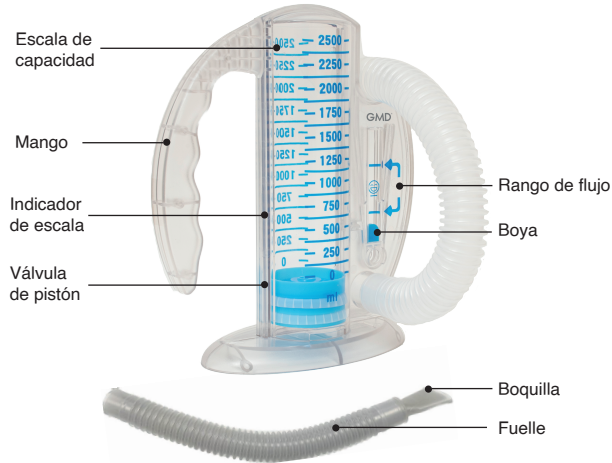

#### Nota

- Siga los consejos del médico para el entrenamiento a largo plazo.
- En caso de sentir mareo, haga una pausa, descanse e inténtelo nuevamente más tarde.
- Si el indicador se sale del rango de la cara sonriente, quiere decir que está respirando demasiado rápido o demasiado lento.



El producto debe ser utilizado por profesionales o bajo la guía de profesionales, y el usuario debe usarlo bajo la supervisión de alguien.