

Konfort Plus®

Una marca **GMD**

Rollator Movo-F

Manual de Usuario

Código: KP2-808F



Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Contenido

1. Producto	3
2. Antes de usar	3
2.1 ¿Qué viene en la caja?	4
2.2 Despliega las ruedas delanteras	4
2.3 Despliega las ruedas traseras	4
2.4 Despliega el asiento	5
2.5 Coloca los manillares	5
2.6 Coloca la bolsa de compras	5
2.7 Monta el soporte de atril	6
3. Funcionamiento	7
3.1 Plegado	7
3.2 Frenos	7
3.3 Elevador de bordillo	9
4. Sentarse, ponerse de pie y caminar	10
5. Mantenimiento	11
5.1 Limpieza	11
5.2 Desinfección	11
5.3 Inspección / Servicio / Reparaciones	11
5.4 Reutilización	11
5.5 Disposición final	11
5.6 Uso previsto	12
5.7 Instrucciones de seguridad	13
5.8 Transporte y almacenamiento	13
6. Especificaciones	14
7. Garantía	16

1. Producto

El **Rollator Movo-F (Ref. KP2-808F)** es un caminador con cuatro ruedas fabricado en aluminio, diseñado para proporcionar apoyo y estabilidad durante la marcha a personas con movilidad reducida. Incluye asiento acolchado, respaldo, bolsa de transporte y sistema de frenos de doble palanca.

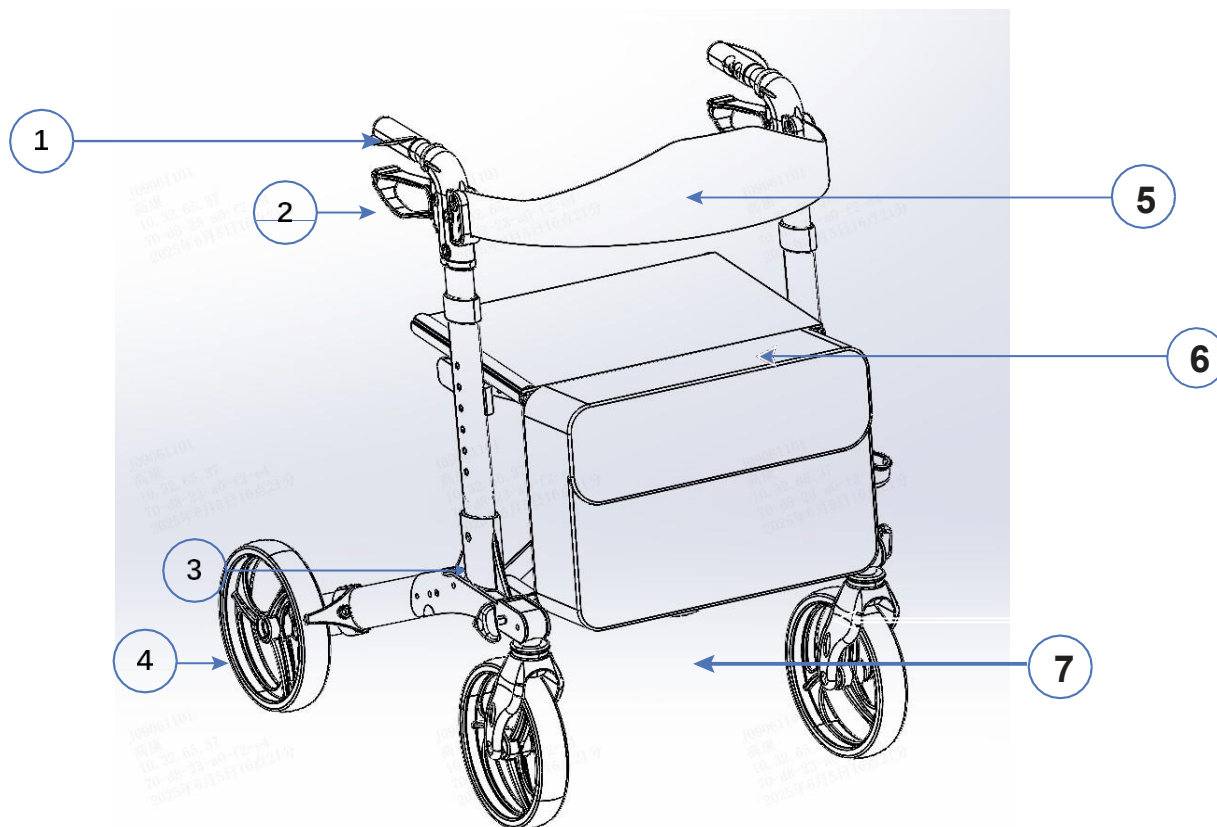


Figura 1. Rollator Movo-F KP2-808F

1. Empuñadura
2. Manija de freno
3. Ajuste de ruedas delanteras
4. Ruedas traseras
5. Respaldo
6. Bolsa
7. Ruedas delanteras

2. Antes de usar

2.1 ¿Qué viene en la caja?

Desembala tu producto y verifica si la entrega está completa. Se deben incluir los siguientes elementos:

- Antes de empezar, verás una bolsa con cuatro tornillos con chapola dentro de la caja.

Verifica tu producto para detectar daños en el transporte. Si encuentras algún daño tras la entrega, contáctate con el transportista.

2.2 Despliega las ruedas delanteras

Baja ambas ruedas delanteras y sujétalas firmemente con dos tornillos con chapola, uno en cada extremo de la parte superior de la rueda.



2.3 Despliega las ruedas traseras

Ahora debes realizar la misma acción que antes, pero con las ruedas traseras.



2.4 Despliega el asiento



2.5 Coloca los manilares

Coloca el tubo ajustable de los manilares en la altura donde te convenga. Para cambiar la altura, presiona el pin de bloqueo; sabrás que la altura está completamente fijada cuando veas el pasador entre uno de los ocho agujeros.



2.6 Coloca la bolsa de compras

Coloca la bolsa en la percha del rollator y usa el Velcro para sujetarla al marco.



2.7 Monta el soporte de atril

Con la ayuda de un atornillador, coloca el tornillo del soporte en el agujero visible.



3. Funcionamiento

3.1 Plegado

⚠ ADVERTENCIA — Mantén los dedos, hebillas y ropa lejos de los elementos plegables del rollator.

⚠ ADVERTENCIA — Por su seguridad, asegúrese de que el rollator está totalmente desplegado y que la estructura está asegurada en su posición antes de usarlo.

1. Quita la bolsa de la compra del marco.
2. Quita los manillares.
3. Tira de la correa de bloqueo en el centro del asiento hacia arriba: el andador se pliega hacia abajo.
4. Afloja los tornillos con chapola de la rueda delantera y luego pliega las ruedas hacia arriba.
5. Usa los tornillos con chapola para bloquear las ruedas.



3.2 Frenos

El rollator está equipado con frenos, accionados mediante dos palancas de freno. Las palancas de freno pueden utilizarse en dos modos de frenado: frenos de detención y frenos de estacionamiento.

⚠ ADVERTENCIA — Verifique el funcionamiento de los frenos para garantizar su seguridad. El estado del sistema de frenado puede verse afectado por el uso intensivo o cuando el rollator se exponga a condiciones clásicas de lluvia.

Modo de parada (frenos de detención):

Aprieta la palanca de freno para frenar y detener el rollator. Cuando liberas la palanca, el rollator volverá a moverse libremente.

Modo de estacionamiento:

Empuja la palanca de freno hacia abajo hasta la posición de estacionamiento para inmovilizar el rollator. Para reactivar los frenos de marcha, tira de las palancas hacia arriba.



3.3 Elevador de bordillo

⚠ ADVERTENCIA — Tenga en cuenta que la estabilidad del rollator cambia cuando se inclina. Actúe con precaución y procure evitar subir obstáculos altos siempre que sea posible.

1. Asegúrese de estar de pie de forma estable mientras sostiene ambas empuñaduras.
2. Utilice un pie y presione la palanca de inclinación para levantar las ruedas delanteras.
3. Mantenga el rollator en esa posición sujetando las empuñaduras y avance lentamente hasta que las ruedas delanteras queden sobre el bordillo.
4. Luego, levante las empuñaduras y avance para colocar las ruedas traseras sobre el bordillo.
5. Cuando el rollator esté estable, puede subir el bordillo usted mismo.

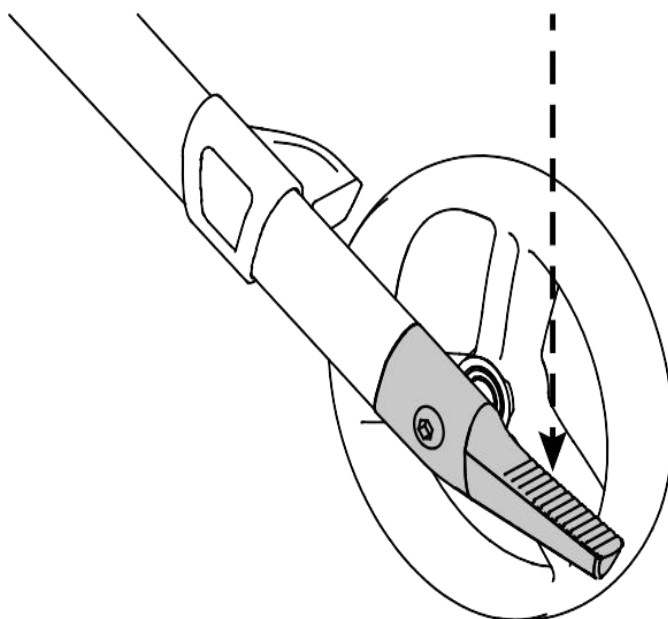


Figura 3. Elevador de bordillo

4. Sentarse, ponerse de pie y caminar

⚠ ADVERTENCIA — Asegúrese de que ambas palancas de freno estén en posición de estacionamiento antes de sentarse. Mantenga los pies entre las ruedas traseras.

- Empuje ambas palancas de freno hacia abajo hasta la posición de estacionamiento.
- Mientras se apoya en las empuñaduras, gire y siéntese en el asiento.
- Para volver a ponerse de pie, apóyese en las empuñaduras y gire nuevamente.
- Tire de ambas palancas de freno hacia arriba y utilice los frenos de marcha.
- Suelte las palancas de freno y avance con el rollator cerca de su cuerpo.

⚠ ATENCIÓN — El rollator debe recibir mantenimiento periódico mediante la eliminación de polvo y suciedad. Preste especial atención a mantener limpios los frenos para garantizar que funcionen siempre correctamente.

5. Mantenimiento

5.1 Limpieza

Todas las superficies pueden limpiarse con un paño textil y agua limpia; si es necesario, utilice una pequeña cantidad de detergente no abrasivo. Después, seque con un paño seco. No utilice toallas de papel, ya que pueden rayar las superficies.

⚠ ADVERTENCIA — La desinfección no debe hacerse con aspersión directa de la solución desinfectante.

5.2 Desinfección

Utilice un paño suave y húmedo y agua tibia con un desinfectante suave, no corrosivo y diseñado para dispositivos médicos para limpiar el rollator.

5.3 Inspección / Servicio / Reparaciones

La vida útil esperada de su caminador es de 5 años. La duración está influenciada por el uso, almacenamiento, mantenimiento, servicio y limpieza. Antes de volver a utilizar el caminador, debe inspeccionarse en los siguientes puntos:

- Integridad del producto.
- Mecanismo de plegado: funcionamiento correcto.
- Pernos y tuercas: correctamente ajustados.
- Frenos: funcionamiento correcto.
- Ruedas (estabilidad, alineación, tornillos de fijación).
- Estructura (deformaciones, estabilidad, conexiones).
- Empuñaduras (bloqueo seguro del sistema de ajuste de altura, buen soporte de las empuñaduras).
- Asiento (desgaste o daños).

Las reparaciones y reemplazos solo pueden ser realizados por personas capacitadas y únicamente deben utilizarse repuestos originales.

5.4 Reutilización

Antes de cada reutilización, haga desinfectar, inspeccionar y realizar mantenimiento al caminador de acuerdo con las instrucciones de las secciones 5.2 y 5.3.

5.5 Disposición final

Al final de su vida útil, debe desechar el caminador de acuerdo con la legislación ambiental local. La mejor manera de hacerlo es desmontar el caminador para facilitar el transporte de las piezas reciclables.

5.6 Uso previsto

El caminador está diseñado como apoyo para la función de las piernas durante la marcha. No utilice el caminador si presenta otras limitaciones físicas que puedan ocasionar un uso inseguro, como debilidad en los brazos, trastornos del equilibrio, discapacidad visual, pérdida de extremidades, entre otros.

El caminador está diseñado y fabricado exclusivamente para ser utilizado como ayuda para caminar por una sola persona con un peso máximo de 136 kg.

El caminador puede utilizarse en interiores y exteriores. Solo debe utilizarse en superficies donde las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo. No utilice el caminador en terrenos rocosos, irregulares o arenosos, ni en lugares con pendientes pronunciadas.

5.7 Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA — Lea y siga las instrucciones de este manual. De lo contrario, podría sufrir lesiones o el caminador podría dañarse.

8. Verifique que no haya piedras u otros objetos bloqueando las ruedas del caminador.
9. Asegúrese de que ambas palancas de freno estén en modo de estacionamiento antes de utilizar el caminador como ayuda para levantarse.
10. Mientras camina, mantenga ambas manos sobre las empuñaduras.
11. Antes de cada uso, verifique que las empuñaduras estén firmemente aseguradas.
12. No sostenga las empuñaduras con las manos mojadas. Si lo hace, puede perder el agarre y el equilibrio.
13. No circule con el caminador en el tráfico. Permanezca siempre en la acera.
14. Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado y mantenimiento.

⚠ ATENCIÓN — Tenga en cuenta que su caminador puede interferir con algunos tipos de sistemas antirrobo. Esto puede ocasionar que se active la alarma de la tienda.



5.8 Transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento del caminador deben realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas. Asegúrese de que el caminador se almacene en un lugar seco.

Proporcione una cubierta o embalaje adecuado para proteger el caminador contra el óxido y agentes externos (agua salada, aire marino, arena o polvo).

Asegúrese de que no se almacenen objetos sobre o contra el caminador para evitar daños.

⚠ ADVERTENCIA — Tenga en cuenta los ajustes correctos y los límites de uso descritos en este manual para evitar el riesgo de un uso inseguro.

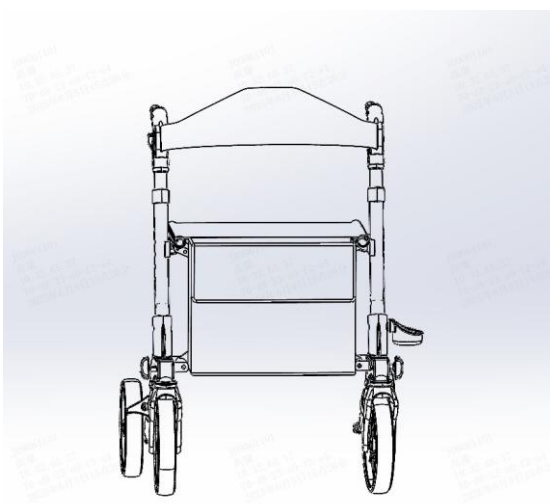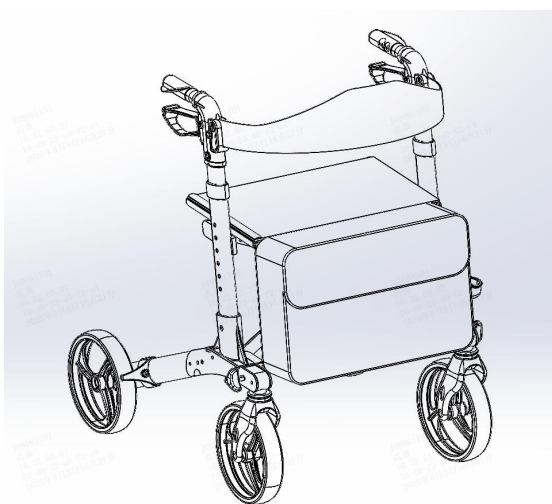

6. Especificaciones

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN
Material	Aluminio
Capacidad de peso	136 kg
Ancho de bolsa	31 cm
Capacidad de la bolsa	5 kg
Largo total	68 cm
Ancho total	57 cm
Peso neto	7.9 kg
Ancho del asiento	40 cm
Altura de la bolsa	32 cm
Altura del asiento	53 cm
Altura total	80 – 96 cm
Dimensiones de las ruedas	8"
Profundidad del asiento	25 cm

Symbol

No.	Symbol	Meaning
1.		Date of Manufacture
2.		Manufacturer
3.		EU authorized representative
4.		CE Marking
5.		Caution
6.		Medical device
7.		Swiss Authorized Representative

7. Garantía

El producto cuenta con una garantía de **un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario final**. La garantía cubre defectos de fabricación y/o materiales bajo condiciones normales de uso. Para solicitar la garantía, el usuario deberá comunicarse con el área de Servicio al Cliente y presentar la prueba de compra correspondiente, describiendo la falla presentada en el producto.

Exclusiones de la garantía

La garantía no aplicará en los siguientes casos:

1. Desgaste normal por uso, incluyendo, pero sin limitarse a: empuñaduras, frenos, asiento/respaldo, neumáticos, ruedas y demás componentes de desgaste.
2. Daños ocasionados por sobrecarga del producto o uso por encima del peso máximo permitido indicado en las especificaciones del producto.
3. Falta de mantenimiento, limpieza o revisiones periódicas conforme a las recomendaciones indicadas en el manual de usuario o instrucciones de servicio.
4. Uso de accesorios, partes o repuestos no originales o no autorizados por el fabricante.
5. Daños ocasionados por negligencia, accidentes, golpes, caídas, almacenamiento inadecuado o uso indebido del producto.
6. Modificaciones, alteraciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
7. Reparaciones efectuadas sin previa notificación o autorización del área de Servicio al Cliente.
8. Daños causados por exposición a humedad excesiva, corrosión, agentes químicos, arena, agua salada o condiciones ambientales inadecuadas.
9. Productos cuyo número de serie, etiquetas de identificación o evidencia de compra hayan sido alterados, removidos o sean ilegibles.

Fabricante e importador

FABRICANTE	IMPORTADO POR
Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd. 298 Yandunshan Road, Zhengjiang New District, Jiangsu Province, China	Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A. Calle 5 oeste # 4a-12, Cali, Colombia gmd.com.co

Líneas de atención al cliente



+ 57 310 493 69 98



Servicioalcliente@impormedical.com.co

